



Síguenos en:

 Health Care Mx

 healthcarevscovid

www.healthcare-mx.com

CATALOGO DE PRODUCTOS

- PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE DROGAS “**One Second**”
- APOSITO PARA CIERRE DE PIEL “**BandGrip Micro-Anchor**”
- GUANTES ESTERIL Y NO ESTERIL “**MTG**”
- PRUEBAS COVID DE ANTIGENO EN TIRA “**LumiQuick Quickprofile**”

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO

Panel multidrogas de 3, 5 y 6
parámetros de fácil uso



ONESECOND[®]
TECHNOLOGY



Segura, fácil de usar
y fácil de leer



Resultados precisos y confiables
en menos de 1 minuto

Cartucho sellado.

A diferencia del resto, la prueba puede ser completamente sumergida en la muestra sin afectar las tiras reactivas.


Fabricado en Estados Unidos.

Tecnología de máxima absorción en 1 segundo.

Confiable y preciso.

Alto margen de duración en almacenamiento.

INSTRUCCIONES SENCILLAS Y PRÁCTICAS

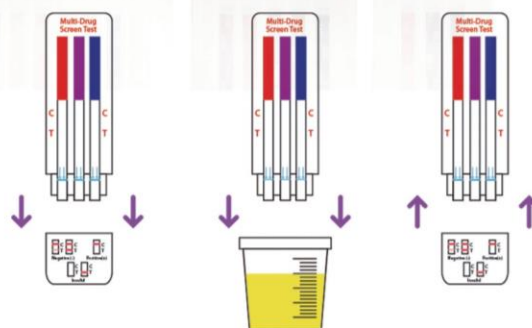



PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO

Panel multidrogas de 3, 5 y 6
parámetros de fácil uso



PRODUCTOS DE LÍNEA

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN
2-PG-P31	Panel de 3 Parámetros (THC/COC/MET)	Caja con 25
2-PG-P51	Panel de 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	Caja con 25
2-PG-P61	Panel de 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	Caja con 25

Bajo pedido: A elegir entre 21 diferentes drogas, desde tiras individuales
Paneles desde 2 hasta 16 parámetros.

PARÁMETROS A ELEGIR

AMP	Anfetamina	ETG	Etil Glucurónido	OPI	Opiáceos
BAR	Barbitúricos	FEN	Norfentanilo	OXY	Oxicodona
BUP	Buprenorfina	K2	Marihuana Sintética	PCP	Fenciclidina
BZO	Benzodiazepinas	MDMA	Éxtasis	PPX	Propoxifeno
COC	Cocaína	MET/MAMP	Metanfetaminas	TCA	Antidepresivos Tricíclicos
COT	Cotonina	MTD/EDDP	Metadona	THC	Marihuana
EDDP	Metadona	MOR/MOP	Morfina	TRA	Tramadol

HEALTHCARE
Insumos Médicos

PRUEBA MULTIDROGAS EN VASO

Vaso multidrogas de 5 y 6
parámetros de fácil uso



Vaso todo en uno



Par de guantes por cada vaso



**Resultados en menos
de 5 minutos**



Etiqueta de seguridad



**Segura, fácil de usar
y fácil de leer**



Fabricado en Estados Unidos



Termómetro integrado



Tira de adulteración (opcional)



PRUEBA MULTIDROGAS EN VASO

Vaso multidrogas de 5 y 6 parámetros de fácil uso



PRODUCTOS DE LÍNEA

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN
2-PG-V51	Vaso Simple - 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	Caja con 25 vasos
2-PG-V61	Vaso Simple - 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	Caja con 25 vasos

Bajo pedido: A elegir entre 21 diferentes drogas, hasta 14 parámetros en cada vaso.

PARÁMETROS A ELEGIR

AMP	Anfetamina	ETG	Etil Glucurónico	OPI	Opiáceos
BAR	Barbitúricos	FEN	Norfentanilo	OXY	Oxicodona
BUP	Buprenorfina	K2	Marihuana Sintética	PCP	Fenciclidina
BZO	Benzodiazepinas	MDMA	Éxtasis	PPX	Propoxifeno
COC	Cocaína	MET/MAMP	Metanfetaminas	TCA	Antidepresivos Tricíclicos
COT	Cotonina	MTD/EDDP	Metadona	THC	Marihuana
EDDP	Metadona	MOR/MOP	Morfina	TRA	Tramadol

NUEVO

VASO MULTIDROGAS iSPLIT-CUP

Permite realizar una prueba multidrogas en orina hasta de 18 parámetros y conservar una muestra para prueba confirmatoria o almacenamiento.



*Opción con tira de adulteración

¡Nuevo Diseño Nuevo Concepto!



La prueba de drogas más rápida del mercado

Se pueden observar resultados negativos en menos de un minuto.



Larga estabilidad de la línea de prueba

Resultados estables por hasta 60 minutos.

- Vaso Multidrogas de hasta 18 parámetros antiderrames.
- No requiere de tubos de recolección de muestra de orina.
- No requiere de manejo ni desecho de objetos punzocortantes.
- El diseño innovador reserva una muestra inalterada sin pasos adicionales.
- Reduce el espacio de almacenamiento necesario para las muestras retenidas



Bajo pedido:

A elegir entre 21 diferentes drogas con o sin tira de adulterantes.

NUEVO

VASO MULTIDROGAS iSPLIT-CUP

Permite realizar una prueba multidrogas en orina hasta de 18 parámetros y conservar una muestra para prueba confirmatoria o almacenamiento.



PRODUCTOS DE LÍNEA

NOMBRE	PRESENTACIÓN
Vaso iSplitCup - 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	Caja con 25 vasos
Vaso iSplitCup - 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	Caja con 25 vasos

Bajo pedido: A elegir entre 21 diferentes drogas, hasta 18 parámetros en cada vaso.

PARÁMETROS A ELEGIR

AMP	Anfetamina	ETG	Etil Glucurónico	OPI	Opiáceos
BAR	Barbitúricos	FEN	Norfentanilo	OXY	Oxicodona
BUP	Buprenorfina	K2	Marihuana Sintética	PCP	Fenciclidina
BZO	Benzodiacepinas	MDMA	Éxtasis	PPX	Propoxifeno
COC	Cocaína	MET/MAMP	Metanfetaminas	TCA	Antidepresivos Tricíclicos
COT	Cotonina	MTD/EDDP	Metadona	THC	Marihuana
EDDP	Metadona	MOR/MOP	Morfina	TRA	Tramadol

Prueba Rápida para la Detección de Drogas

PRUEBA ANTIDOPING CASERA

“Por que darte cuenta, cuenta”

Ahora disponible para realizarla en casa, oficina o en cualquier lugar de manera discreta y segura.

Contenido:

- 1 Panel multidroga
- Vaso estéril
- Instructivo de uso
- Par de guantes



CÓDIGO

NOMBRE

2-OSC P06

Prueba Casera de 6 Parámetros

Detecta 6 tipos de drogas en menos de 2 minutos

Mariguana

Cocaína

Anfetaminas

Metanfetaminas

Opiaceos

Benzodiacepinas

Escanéa y conoce por qué darte cuenta, cuenta.



BANDGRIP®

MICRO-ANCHOR® SKIN CLOSURE

RAPIDEZ • SIMPLICIDAD • FUERZA



LA CURACIÓN COMIENZA CON UN CIERRE SEGURO.

Con un agarre firme y una sujeción duradera, los BandGrip® Micro-Anchor® Skin Closures mantienen las incisiones quirúrgicas y los bordes de las laceraciones cerrados con simplicidad y fuerza. Las almohadillas de Micro-Anchors curvos patentados se aseguran suavemente a la piel y los bordes de la herida se invierten levemente cuando se jala de BandGrip a través de la herida. BandGrip es transparente y no está fabricado con látex de caucho natural.

- **Cierre Epidérmico.** Cierra la piel para mayor comodidad y movimiento sin suturas ni grapas, al tiempo que reduce la preocupación por los resultados cosméticos negativos y la extracción dolorosa.
- **Simple e Intuitivo.** BandGrip puede ser aplicado con éxito por una amplia gama de profesionales de la salud además de los médicos. BandGrip también se puede remover mediante llamadas de telemedicina cuando se indique.
- **Eficiente y Económico.** BandGrip, usado solo o en múltiples, es una alternativa que ahorra tiempo a las modalidades de cierre actuales. El cierre de una pequeña incisión se programó en <30 segundos* en comparación con las suturas. BandGrip no requiere una visita de regreso para removerse si así lo determina el médico del paciente.

* Datos en archivo

www.healthcare-mx.com

UNA DIFERENCIA QUE LOS PACIENTES PUEDEN VER Y SENTIR

Micro-Anchors Hacen la Diferencia

Los exclusivos Micro-Anchors curvos sujetan la piel de forma suave y segura para mantener los bordes de la herida cerrados durante el período crítico de cicatrización. Por diseño, se evitan potencialmente los problemas comunes asociados con los materiales de cierre convencionales.

Una Diferencia que los Pacientes puede Ver y Sentir

Los BandGrip Micro-Anchor Skin Closures pueden mejorar la experiencia del paciente tanto en la recuperación como en casa por sí mismos.

- **Apariencia y Sensación Familiar.** BandGrip puede brindar a los pacientes una sensación de normalidad y confianza.
- **Apoyo de la Ambulación.** A diferencia de las superficies elevadas de las grapas y cierres, y los "barbados" asociados con las suturas, la superficie lisa de los BandGrip Micro-Anchor Skin Closures no se engancha en los vendajes o la ropa; los pacientes pueden ducharse con ellos después de 24 horas.

Instrucciones de Aplicación

- 1 Limpie la herida de acuerdo con los protocolos del centro.
- 2 Asegúrese de que el área de aplicación esté limpia y seca.
- 3 Abra la bolsa estéril mediante una técnica aséptica.
- 4 Al separar la parte posterior, asegúrese de que los guantes estén secos para mantener la integridad del adhesivo.
- 5 Presione y aplique un lado del BandGrip firmemente sobre la piel, adyacente al borde de la herida.
- 6 Con la otra mano, pellizque y acerque los bordes de la piel. También se pueden utilizar fórceps.
- 7 Estire suavemente BandGrip a través de los bordes de la piel pellizcados/aproximados y presione BandGrip hacia abajo en el otro lado de la herida para fijarlo en su lugar.
- 8 Los dispositivos BandGrip adicionales se pueden colocar en mosaico solapando cierres o aplicando cierres a lo largo de la herida separados por aproximadamente 3mm.

Código del Producto	Tamaño	*representa la longitud y el ancho del cierre de la herida
BG1003	*2.5 cm x 6.4 cm	
BG1003-F	*2.5 cm x 6.4 cm perforado	
BG1002	*3.8 cm x 8.8 cm	
BG1002-F	*3.8 cm x 8.8 cm perforado	
BG1000	*5 cm x 5 cm	
BG1000-F	*5 cm x 5 cm perforado	
BG1005	*7.6 cm x 5 cm	
BG1005-F	*7.6 cm x 5 cm perforado	

Instrucciones de Retiro

- 1 Retire primero los bordes de las tiras BandGrip.
- 2 Sostenga la piel cercana a la herida mientras quita el BandGrip.
- 3 Tire suavemente hacia atrás de un lado de BandGrip en la dirección opuesta a la herida para liberar los Micro-Anchors y minimizar cualquier daño a la epidermis. Tire hacia el otro lado para quitarlo por completo.

Notas: BandGrip se puede usar hasta 14 días. Las pequeñas marcas rojas tipo agujeros de alfiler pueden ser visibles al retirarlas y pueden durar hasta dos semanas.

Rapidez * Simplicidad * Fuerza

La curación comienza con un cierre seguro.